




neodisher® MediClean forte



Isıya dayanıklı ve dayanıklı olmayan aletlerin temizliği için deterjan

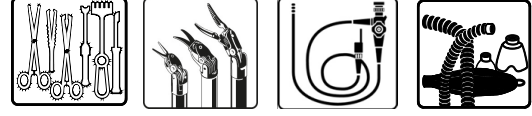

Konsantre sıvı

Kullanım alanları:

- Isıya dayanıklı ve dayanıklı olmayan laparoskopik aletlerin ve mikro aletlerin, esnek endoskopların, anestezi ekipmanlarının, konteynirlerin ve diğer medikal ürünlerin otomatik makinalarda temizliğinde
- Isıya dayanıklı ve dayanıklı olmayan aletlerin daldırma banyolarında ve ultrasonik banyolarda manuel temizliğinde
- da Vinci EndoWrist aletlerin manuel ve otomatik makinalarda temizliğinde de kullanılabilir
- Kişisel korunma ekipmanlarının (PPE)₁ manuel ve otomatik makinalarda temizliği

Performans:

- Kurumuş ve denatüre kanın güvenli temizliği
- Organik materyallerin büyük oranda azaltılması ve protein artıklarının yeniden oluşmasının önlenmesi
- Aletlerin temizliğinde, Alman Robert-Koch-Institute'nün (RKI) Creutzfeldt-Jakob Hastalığının yeni varyantının (vCJD) kontaminasyon riskini en aza indirmek için tavsiyelerini yerine getirir.
- Farklı prion testi suşlarındaki patojenik prion proteinlerini ortadan kaldırır; > 2 lg adımla (% 1, 55 °C, 10 dk)₂
- Biyofilmlerin temizlenmesi
- Paslanmaz çelikten üretilmiş aletlerin ve diğer ürünlerin, optiklerin, konvensiyonel plastiklerin ve anestezi ekipmanlarının temizliği
- Anodize alüminyum ürünlerin uygunluğu önceden test edilmelidir

Özgün özellikler:

- Mükemmel materyal uyumluluğu
- Alkalinite donörlerine, sürfaktanlara ve enzimlere dayalı benzersiz formül sayesinde birinci sınıf temizlik

- neodisher MediClean forte ile makinalarda temizlikten önce manuel ön temizleme yapıldığında durulama gerekmez.
- Makinalarda temizlikte nötralizasyon kullanımı gerekli değildir. Bu sayede kısa program süresi sağlanır.
- Tehlike etiketi yoktur. Tehlikesiz ürün.

Uygulama ve dozaj:

neodisher MediClean forte yıkayıcı dezenfektörlerde kullanıldığı gibi daldırma ve ultrasonik banyolarda da kullanılabilir. Dozlama miktarı ilgili uygulama alanı ve aletlerin kontaminasyon durumuna göre seçilir. da Vinci EndoWrist aletlerin temizliğinde,

neodisher MediClean forte manuel ön temizlikte, ultrasonik ön bakımda ve otomatik makinalarda kullanılabilir.

Kişisel koruyucu ekipmanları tüm daldırma süresi boyunca solüsyona tamamen batırılı olmalıdır. Sonrasında en az içme suyu kalitesinde akan su ile durulayın.

neodisher MediClean forte kullanırken aşağıdaki parametreler önerilir:

Aletlerin otomatik veya manuel temizliği:

Isıya dayanıklı ve dayanıklı olmayan aletlerin otomatik temizliği	2 - 10 ml/l (%0,2 - 1,0)*, örn.40 - 60 °C, 10 dk
Standart dozaj	5 ml/l (% 0,5)*, örn.55 °C, 10 dk
Endoskopların ve aksesuarlarının otomatik temizliği	5 ml/l (%0,5), 35 - 55 °C, 5 dk



neodisher® MediClean forte

da Vinci EndoWrist aletlerin otomatik temizliği	8 ml/l (%0,8), 40 - 55 °C, 10 - 30 dk**
Isıya dayanıklı ve dayanıklı olmayan aletlerin daldırma ve ultrasonik banyolarda manuel temizliği	5 - 20 ml/l (%0,5 - 2)*, maks. 40°C, 10 - 30 dk
Esnek endoskopların ve aksesuarlarının daldırma ve ultrasonik banyolarda manuel temizliği	5 - 30 ml/l (%0,5 - 3)*, maks. 40°C, 5 - 10 dk
da Vinci EndoWrist aletlerin daldırma ve ultrasonik banyolarda manuel temizliği	10 ml/l (%1,0), maks. 40 °C

Kişisel koruyucu ekipmanların₁ otomatik ve manuel temizliği:

Nefes alma aparatlarının/ respiratörlerin ve aksesuarlarının daldırma banyolarında manuel temizliği	10 ml/l - 30 ml/l (%1,0 - %3,0)*, soğuk su maks. 40 °C, 15 - 30 dk
Kişisel koruyucu ekipmanlarının (üreticisinin tavsiyelerine uyararak) nefes alma aparatlarının/ respiratörlerin ve aksesuarlarının yıkayıcı dezenfektörlerde ve/veya yıkayıcı ekstraktörlerde (üreticinin önerdiği programlara göre) otomatik temizliği	10 ml/l (%1), 55°C, 2 dk

* doz miktarı, diğer etkilerin yanı sıra kirlilik derecesine göre

** yıkayıcı dezenfektör üreticisinin tavsiyesine göre

Uygun dozlamaya cihazını kullanın.

Temizlik ve son durulamada deiyonize su kullanımı tavsiye edilir. Son durulamada deiyonize su kullanımı sayesinde su lekeleri önlenir ve aynı zamanda anodize alüminyum korunmuş olur.

Klasik alkali deterjanların kullanımında gerekli olan nötralizan kullanımı gerekli değildir. Oftalmik aletlerin temizliğinde son durulamadan önce bir ara durulama tavsiye edilir.

Manuel temizlikte kullanılan solüsyon kirlilik durumuna bağlı olarak veya günlük olarak değiştirilmelidir.

Notlar:

- Profesyonel kullanım için
- Başka ürünlerle karıştırmayın
- Ürün değişikliğinde emme hortumu dahil dozlamaya sistemini suyla durulayın.
- Yeniden işleme, tıbbi cihazlarla ilgili düzenlemelerin tüm yönetmeliklerine uygun olmalı ve süreçler uygun valide edilmiş olarak yapılmalıdır.
- neodisher MediClean forte solüsyonu komple durulanmalıdır (tercihen deiyonize su ile)
- Tıbbi cihazın işlenmesi: Lütfen tıbbi cihaz üreticilerinin DIN EN ISO 17664 standartına göre verdikleri tavsiyelere uyararak yeniden işlemeye dikkat edin.
- Kişisel koruyucu ekipman₁ işlenmesi: Lütfen Personel koruyucu ekipman üreticisinin tavsiyelerine uyun.
- Yıkayıcı dezenfektörün üreticisinin verdiği tavsiyeler dikkate alınmalıdır.

Uzman raporları:

da Vinci EndoWrist aletlerin temizliği hakkındaki rapor istendiğinde temin edilebilir.

neodisher® MediClean forte'nin kişisel koruyucu ekipmanların₁ malzeme uyumluluğu çeşitli testlerle olumlu olarak değerlendirildi ve bağımsız kuruluşlarca belgelendirildi.



neodisher® MediClean forte

Teknik veriler:

pH-aralığı	10,4 – 10,8 (2 - 10 ml/l, deiyonize suda, 20 °C), şebeke suyunda veya yumuşatılmış suda, taşınan durulama suyunda değerler farklılık gösterebilir.
Yoğunluk	yaklaşık. 1,1 g/cm ³ (20 °C)
Viskozite	< 10 mPas (konsantre, 20 °C)
Titrasyon faktörü	0.77 (neodisher MediClean forte titrasyon talimatlarına göre)

İçeriği:

Deterjanlar yönetmeliği (EC) No 648/2004'e göre içeriği:
%< 5 noniyonik ve anyonik sürfaktanlar
ayrıca: enzimler

CE-ışareti:

neodisher MediClean advanced tıbbi cihazlar için Avrupa yönergeleri ile uyumludur.

Ürünle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bunu üretici ve ilgili ulusal makama bildirin.

Depolama şartları:

Serin fakat donmayacak şekilde depolayın. Daima 0°C - 25 °C aralığında depolayın. Güneş ışığından koruyun. Tavsiyelere uygun olarak depolandığında kullanım süresi 2 yıldır. Son kullanım tarihi etiketteki kum saati sembolünün yanındadır.

Açılmamış ürünlerde depolamada renk değişikliği olabilir. Bu kullanımını engelleyecek şekilde özelliklerini etkilemez.

Tehlike ve ihtiyati durumlar:

neodisher MediClean forte (CLP-Düzenleme EC) No 1272/2008'e göre tehlikeli değildir.

Bidon sadece boş ve ağzı kapalı iken atın. Ürün kalıntılarının bertarafı için Güvenlik Veri Formuna bakın.

Güvenlik bilgileri için Güvenlik Veri Formuna bakın.

Bu form www.drweigert.com adresindeki "Service/Downloads" bölümündedir.

MB 4050/03-4

Yayın Tarihi 05/2022

¹ Kişisel koruyucu ekipman (PPE), kimyasallar karşı koruyucu giysidir.

Mevcut bilgilerimize uygun olan yukarıdaki bilgilerle, ürünümüzü olası güvenlik gerekliliklerine ilişkin olarak açıklıyoruz, ancak herhangi bir kalite tanımı veya belli özelliklerin vaadini içermiyoruz.